


# 棄置血液透析廢料 Disposal of Hemodialysis Waste

用過的透析喉管和透析器可以連同家居垃圾一起棄置，但這只限於您已妥善處理之後可供安全收集的情況。


每次完成治療後都按這些步驟處理：



按著SELECT (選擇) 鍵三秒，使空氣探測器停止操作。

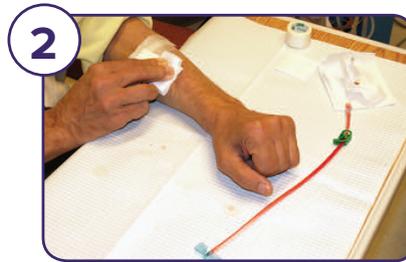

移除針頭。按住動靜脈瘻管(AVF)位置或蓋住中心靜脈導管(CVC)

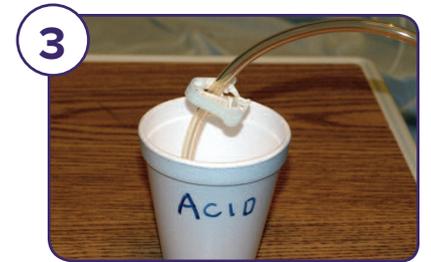

將動脈血路管放入裝有濃縮酸液的杯內，然後打開夾子。



讓動脈血路管吸取酸液。吸盡所有酸液後，繼續開動血泵，讓空氣也被吸進管道內。



讓所有喉管的廢料都完全清空落入廢料袋(最少兩分鐘)，然後停動血泵。



排走透析器內的透析液。



把用過的喉管和透析器放進雙層厚身黑色垃圾膠袋內。



將袋中廢料倒進廁所。



存放在家居動物或野生動物不可及的地方。與家居垃圾一起棄置於一個可密封的容器內。



**永遠不得** 將針頭掉進垃圾中。所有針頭都應掉進棄針箱內。